

# Медицинское кресло Capre RC2

Подходит для осмотра и обследования, диализа и химиотерапии

Медицинское кресло Lojer Capre RC2 повышает комфорт пациента во время длительного лечения. Универсальные настройки и разнообразие качественных принадлежностей облегчают позиционирование пациента.



Великолепная многофункциональная кушетка Capre разработана совместно с профессиональными медицинскими работниками для удовлетворения требований современных методов ухода за пациентами при проведении таких процедур, как диализ и цитостатическая терапия. Кушетка Capre отличается привлекательной формой, мягким кожзаменителем, возможностями индивидуальной регулировки (с помощью электроприводов в количестве до пяти) и встроенными удобствами, такими как подставка для iPad и индивидуальное освещение. Все это объединено для того, чтобы повысить качество жизни пациента в период восстановления и в то же время улучшить представление об уровне медицинского учреждения.

Особенностью кушетки являются три программируемых положения (в том числе положение «в шезлонге» и положение тренделенбург) и слот карты памяти для сохранения персональных настроек заказчика. При необходимости одним нажатием кнопки кушетка может быть переведена в лежачее положение или в положение для проведения искусственного дыхания.



Отсканируйте QR код, чтобы посмотреть видео о продукте, или перейдите по ссылке <http://youtu.be/EbrNPcGUhyk>

**LOJER**® For easy care

## Технические характеристики


- Общая длина: 186..213 см
- Регулировка высоты: 60..85 см
- Колесики: Ø 75 мм, с центральной блокировкой
- Регулировка спинной секции: -12°..+90°
- Регулировка головной секции: 0°..10°
- Длина спинной секции: 600 мм
- Регулировка сиденья: +12°..0°
- Ширина сиденья: 620 мм
- Общая ширина: 880 мм
- Регулировка ножной секции: -80°..0°, электроприво
- Регулировка опоры для руки: 0°..180° отведение
- Безопасная рабочая нагрузка (SWL): 160 кг
- USB разъем: Power 4W
- Электрическая система: 24 V
- Маркировка CE: Да
- Гарантия: 2 года
- Страна производства: Финляндия



Свойства:	
Наличие сертификата CE, Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	x
Великолепная обивка, форма которой соответствует строению тела	x
Возможность комбинирования двух цветов кожаменителя	x
Выбор из 14-ти высококачественных видов обивки FUTURE, в том числе антибактериальные варианты	x
Колеса с центральной блокировкой специальной конструкции для перемещения кушетки	x
Интеллектуальная система управления с программируемыми положениями	x
Положение Тренделенбург - электропривод (12° макс.)	x
Регулировка спинной секции - электропривод	x
Регулировка угла наклона сиденья - электропривод	x
Регулировка высоты - электропривод	x
Цельная ножная секция (электропривод) с регулировкой длины	x
Регулировка длины и угла наклона головной секции	x
Подлокотники остаются в горизонтальном положении вне зависимости от угла наклона спинной секции	x
Возможность поворота подлокотников на 180 градусов	x
Безопасная, бесшумная электрическая система напряжением 24 В, зарядное устройство с адаптером USB	x
Гарантия 2 года	x
Опциональные свойства:	
Легко адаптируемая опора для рук с регулировкой угла и высоты	o
Подставка для ног для цельной ножной секции	o
Столик для еды	o
Подставка для планшетного компьютера с гибким держателем	o
Заглушка для выреза для лица	o
Вырез для лица	o
Декоративные швы на обивке	o
Светодиодная лампа (через USB-адаптер)	o
Штатив для внутривенных вливаний	o
Проводной пульт управления (вместо гибкого рычага)	o
Ножная педаль управления	o

Обозначения: x = стандартные свойства, o = опция, - = недоступно


## Принадлежности

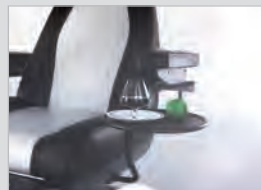

Столик для еды




Подставка для планшета

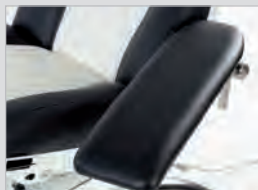

Опора для рук с большой подушкой



Led подсветка

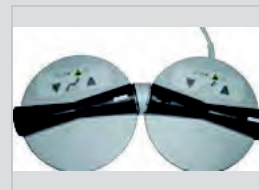

Педаль управления