

# Кровать медицинская складная Modux

Родной дом, пожалуй, лучшее место на свете. Иногда пациенту необходим особый уход в домашних условиях. Мы создаем специальные кровати для наиболее комфортного использования именно в условиях домашнего пребывания.

Специальная складная кровать Modux - функциональная модель, максимально удобная в использовании как пациентом, так и обслуживающим персоналом.

“Невероятно мобильная кровать. Сборка занимает несколько минут”



Кресло медицинское для всех  
Lojer 6900 (для ЛД и инвалидов)


Кровать имеет минимальную высоту 27 см., что делает доступ к ней наиболее безопасным. Посредством электрических моторов (нажатием клавиши на пульте управления) кровать складывается до размера 60 x 90 см., что делаем возможным ее перемещение в стандартном лифте Вашего дома, в микроавтобусах или минивэнах. Кровать Modux - надежный вариант для клиентов, которым необходима универсальность и мобильность кровати.

**LOJER**® For easy care


Healthcare | Senior Care | Medical Wellness

- Минимальная высота всего 27 см. (при колесах диаметром 100 мм.)
- Торцы выполнены из чистого дерева (береза или бук) - пара
- Боковые ограждения с системой фиксации, выполнены из чистого дерева (береза или бук) – пара
- Ручной пульт управления
- Индивидуально-блокирующиеся колеса диаметром 100 мм. (стандарт) или 125 мм. (опция)
- Возможность установки дуги для активации пациента
- Электрические компоненты изолированы и имеют защиту от брызг
- Металлические части кровати прошли специальную обработку перед покраской для гарантии долговечного использования.

|   |  |
|---|--|
| Размер в сложенном состоянии (ШхДхВ)                            | 60*90*140 см.  |
| Общая ширина с боковыми ограждениями                            | 90 или 100 см.   |
| Общая длина   | 224 см.  |
| Тип торцов и боковых ограждений для кровати шириной ложа 80 см. | Береза   |
| Тип торцов и боковых ограждений для кровати шириной ложа 90 см. | Бук  |
| Диапазон регулировки высоты                                     | 27-67 см. или 29-69 см. (в зависимости от размера колес) |
| Рекомендованный размер матраса                                  | 205x 78/88 x 13 см.                                      |
| Общий вес   | 92 или 96 кг.  |
| Индивидуально-блокирующиеся колеса                              | Ø100 мм. (стандарт) или Ø125 мм. (опция)                 |
| Безопасная рабочая нагрузка                                     | 170 кг.  |
| Электрическая система   | 24В  |
| Диапазон регулировки спинной секции                             | 0-70°, электропривод                                     |
| Диапазон регулировки секции голени                              | 0-13°, электропривод                                     |
| Диапазон регулировки коленной секции                            | 0-40°, электропривод                                     |
| Диапазон регулировки Анти-Тренделенбург                         | 0-12°, электропривод                                     |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ                | Наличие  |
| Гарантия  | 2 года/10 лет на каркас                                  |
| Страна производства   | Финляндия  |
| Наличие патента   | Да   |

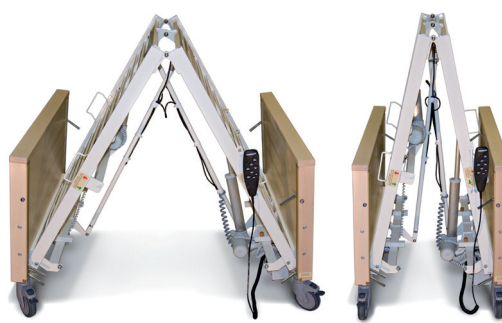

### Принадлежности:

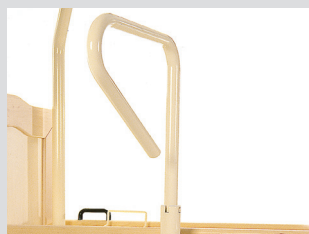

Упор для пациента (код 101967)



Дуга для активации пациента (код 101912)



Обивка на боковые ограждения (код 101182PRO)



Столик для чтения и еды (размещение на боковых ограждениях)

**LOJER**® For easy care

Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 134  
Тел. +7 (495) 725 06 95 | [russia@lojer.com](mailto:russia@lojer.com) | [www.lojer.com](http://www.lojer.com)